



866.DTE.INFO (383.4636)  
www.DentalEZ.com

62491 F Fecha de Publicación 2018/01/30



Juego de Repuesto

**Concentrix**  
**Cartucho del Portafresa**  
**Manual & Anillos en "O"**

StarDental® Instruments

StarDental® Instruments

**Concentrix**  
**Manual Chuck**  
**Turbine &**  
**O-Rings**

Replacement Kit



62491 F Date of Issue: 2018/01/30

866.DTE.INFO (383.4636)  
www.DentalEZ.com



StarDental® Instruments



1816 Colonial Village Lane  
Lancaster, PA 17601 U.S.A.  
Printed in the USA  
2018 DentalEZ, Inc.

**Garantía Limitada**  
**El Repuesto del Cartucho de la Turbina y Anillos en "O"**  
**de StarDental®** se garantizan contra defectos de material y mano de obra por tres meses desde la fecha de compra. Esta garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:  
ESTA GARANTIA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y CAPACIDAD PARA SU USO.

**POLIZA DE GARANTIA DE REPARACION O REEMPLAZO:** La Reparación o Reemplazo hecho bajo la garantía del artículo nuevo esta garantizada únicamente por resto del original de la nueva garantía. Reparaciones o Reemplazos hechos después del periodo de la garantía del artículo nuevo llevan la garantía de arriba.

**Limited Warranty**

**StarDental® Concentrix Manual Chuck Turbine and O-Rings Replacement Kit**, is warranted against defects in material and workmanship for 3 months from date of purchase.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE.

StarDental® Instruments



StarDental®  
1816 Colonial Village Lane  
Lancaster, PA 17601 U.S.A.  
Printed in the USA  
© 2018 DentalEZ, Inc.


**WARRANTY REPAIR/REPLACEMENT POLICY:** Repairs/Replacements made under the new item warranty are warranted only for the remainder of the original new warranty. Repairs/Replacements made after the original new item warranty period carry the warranty above.

# Concentrix®

## Turbine & O-Rings Replacement

### INSTRUCTIONS:

**Note:** Handpieces bearing serial numbers A through I do not require O-rings when changing the turbine. Follow procedure in Section **A**.

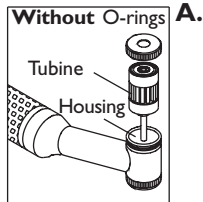

- A.**
1. Push cartridge out back of handpiece.
  2. Clean housing with a cotton swab soaked in isopropyl alcohol.
  3. Install new turbine.
  4. Thread end cap on.




### **B.** NEW With O-rings

1. Remove end cap by turning counterclockwise.
2. Push cartridge out back of handpiece.
3. Remove the O-rings using an instrument such as an explorer.
4. Clean housing with a cotton swab soaked in isopropyl alcohol.
5. Use blunt end of cotton swab to install new O-rings.
6. Apply *DentaLube® II*, **StarDental® Part #262539**, to inside of O-rings with soft end of cotton swab before installing turbine.

**CAUTION:** Take care to prevent damage to housing and O-rings when installing O-rings.

7. Install new turbine.
8. Thread end cap on.

Turbine & O-Rings Replacement Kit,  
**StarDental® Part #203111**

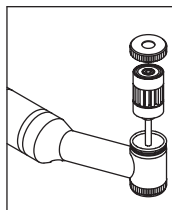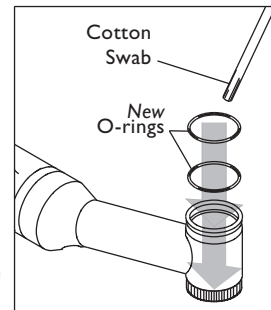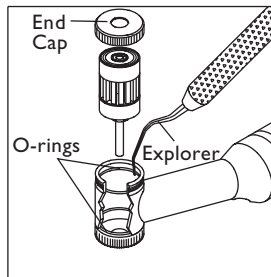

# Concentrix®

## Repuesto del Cartucho & Anillos en "O"

### INSTRUCCIONES:

**Nota:** Los baleros del cartucho de las Piezas de Mano seriadas de la A, a la I no requieren remplazarlos de Anillos en "O". Siga el procedimiento en la sección **A**.



- A.**
1. Empuje el cartucho hacia atrás de la pieza de mano.
  2. Limpie dentro del receptáculo con un cotonete remojado en alcohol isopropílico.
  3. Instale el cartucho nuevo.
  4. Enrosque la tapa.

### **B.** Con Anillos en "O" NUEVOS

1. Quite la tapa girando en sentido contrario del reloj.
2. Empuje el cartucho hacia atrás de la pieza de mano.
3. Desprenda los anillos en "O" con un instrumento tal como un explorador.
4. Limpie dentro del receptáculo con un cotonete remojado en alcohol isopropílico.
5. Use la punta de un cotonete sin algodón para instalar los anillos en "O".
6. Aplique con un cotonete *DentaLube® II*, Parte **StarDental® #262539**, dentro y fuera de los anillos en "O" antes de instalar el cartucho.

**PRECAUCION:** Tenga cuidado de no dañar el interior del receptáculo del ángulo o los anillos en "O" al momento de la instalación.

7. Instale el cartucho nuevo.
8. Enrosque la tapa.

Juego de Repuesto del Cartucho Parte  
**StarDental® Part #203111**

