


CORE™ Unidad

Diseñada con mente de simplicidad, la línea de productos CORE provee una unidad dental totalmente fácil de usarse con componentes comunes, colgadores simples integrados y un manómetro de presión fácil de leer. Disponible en tipo Magellan ambidiestra o montada a la consola, ambas para posicionar piezas de mano StarDental y auxiliares de fácil y alcance comfortable.

Las características incluyen

- Charola de Aluminio
- Manómetro para monitorear fácilmente la presión
- Mango con freno integrado
- Fácil acceso al bloque de control y mangueras para Fácil mantenimiento (Ver Figura A)
- Brazo flexible de aluminio para estabilidad y fácil posicionamiento
- Opcional controles digitales integrados
INSTRUMENTOS PARA EL ASISTENTE
- Colector de Solidos colocado en el centro
- Opcional control digital integrado

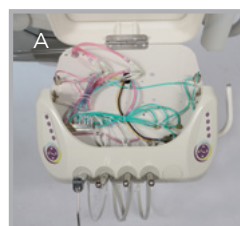

CORE Lámpara

La Lámpara LED CORE hene con 3 intensidades de luz y sensor para su funcionamiento. Los mangos pueden ser reposicionados 360° y pueden ser autoclavables. Las características incluyen:

- Enfoque de la luz rectangular
- Mangos magnéticos removibles y autoclavables (Ver Figura A)
- Ajuste de la Intensidad de Luz por Sensor a 30,000, 20,000 y 10,000 lux
- Sensor programable para tres intensidades de luz
- 5500° - 6300° Kelvin Color
- Lente Removible para fácil limpieza



CORE™ Sillon

Nuestro nuevo sillón CORE provee un gran soporte y ayuda a los pacientes mantenerse relajados para una experiencia dental positiva. Con una base extremadamente fuerte y estable. El Sillon CORE sitúa a los pacientes en una posición ideal con un cilindro hidráulico de levante durable. El sillón es silencioso y potente para un funcionamiento suave.

Sus características incluyen:

- Mecanismo de Soporte Hidráulico
- Marco del sillón en acero fundido resistente
- En aluminio fundido el respaldo del sillón, La base, descansabrazos y el cabezal
- Control de Emergencia de paro
- Cabezal de doble articulación que se ajusta fácilmente al paciente (Ver Figura A)
- Control digital opcional para cuatro posiciones preestablecidas programables (Ver Figura B)
- Tapiceria en Standard Naugahyde y NaugaSoft Con respaldo ancho en Saddle, Black, Sand, Deep Sapphire and Coco
- Giro de rotación de 30 grados con seguro (Ver Figura C)
- Control de Pie Opcional con posiciones preestablecidas programables (Ver Figura D)

